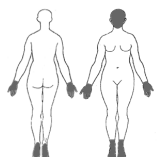
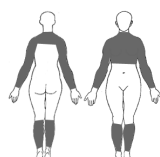
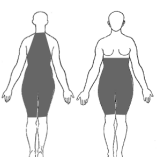
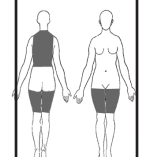














USMIN ELEKTRODIT

Helppokäyttöiset, itsestään liimautuvat DJO-elektrodit TNS-, NMES-, HVS-, IF- ja mikrovirtahoitoihin. Pehmeät ja mukautuvat. Kestävät 20-50 käyttökertaa.

VALITSE ELEKTRODIT KÄYTTÖKOHTTEEN MUKAISESTI

											
tuotteen malli, koko ja pakkaus-koko	 32 mm 4 kpl/pss	 50 mm 4 kpl/pss	 40x60 mm 4 kpl/pss	 50x50 mm 4 kpl/pss	 50x90 mm 4 kpl/pss	 50x100 mm 4 kpl/pss	 50x100 mm 2 kpl/pss	 80x130 mm 2 kpl/pss	 50x100 mm 4 kpl/pss	 50x100 mm 2 kpl/pss	
DJO Dura-stick premium			tuotenro 1322 14,50 €			tuotenro 1323 16,50 €		tuotenro 1324 14,50 €			
DJO Dura-stick plus	tuotenro 1374 9,50 €	tuotenro 1375 12,50 €		tuotenro 1376 13,50 €	tuotenro 1377 14,50 €		tuotenro 1378 10,50 €				
NEPPARI-ELEKTRODI(*)				tuotenro 1316 13,50 €					tuotenro 1313 14,50 €		
VYÖ-ELEKTRODI(**)										tuotenro 1314 10,50 €	

(* Cefar Easyyn (** Cefar Easyyn vyöhön) HINNAT SIS ALV.

Käyttö

1. Puhdista iho vedellä ja saippualla.
 2. Ota elektrodit pussista ja liitä kaapelit elektrodeihin.
 3. Irrota elektrodit suojapaperista. Älä vedä kaapeleista. Säästä paperi.
 4. Kostuta liimapuoli muutamalla vesipisaralla ja anna veden imeytyä.
 5. Aseta elektrodit iholle.
- Huom! Elektrodien liimautumiskyky paranee niiden saatuaessa ihon lämpötilan.

HUOMIOITAVAA

1. Säilytä elektrodeja alusmuovin päällä suljetussa pussissa.
2. Älä säilytä elektrodeja yli 25° lämpötilassa.
3. Elektrodit kestävät pidempään, jos et käytä samaa paria kahta kertaa peräkkäin, vaan vaihtelet toisen parin kanssa.
4. Elektrodien liimapuoli kannattaa kostuttaa muutamalla vesipisaralla aina ennen käyttöä. Jos elektrodit ovat erittäin kuivuneet, anna veden imeytyä pidemmän aikaa. Kostuta elektrodit tällöin perusteellisesti ja anna veden imeytyä muutaman tunnin ajan.
5. Kun elektrodit eivät enää kiinnity, vaikka ne on kostutettu, on aika hankkia uudet.
6. Jokaisella käyttäjällä tulee olla omat elektrodit.

Mikäli ilmenee ihon ärsytystä, ota yhteyttä hoidon määränneeseen henkilöön.

TILAUKSET ILMAN TOIMITUSMAKSUA JA LASKUTUSLISIÄ

Usmin Fysioterapiapalvelu Oy,
Mustankiventie 43, 05800 Hyvinkää,
puh. (019) 437 057, fax. (019) 437 077,
www.usmin.com, info@usmin.com

